




HU Melegítő funkciós masszírozó
Használati útmutató..... 4



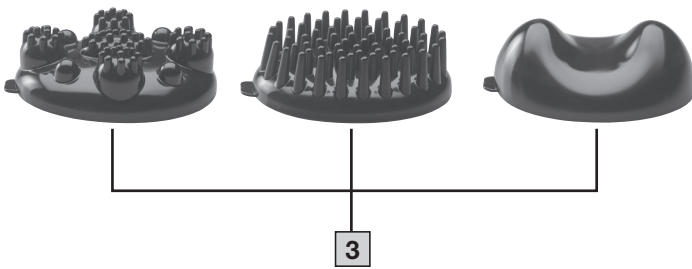

Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.

⚠ FIGYELEM!

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról tájékoztatták őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.
- A készüléknek forró a felülete. A hővel szemben érzékeny személyeknek óvatosnak kell lenniük a készülék használatakor.
- Semmi esetre sem szabad a készüléket felnyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható annak kifogástalan működése. Ennek figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

Tartalom

1. A csomag tartalma	4	7. Alkalmazás	6
2. Jelmagyarázat	4	8. Tisztítás és ápolás	6
3. Rendeltetésszerű használat	5	9. Mi a teendő probléma esetén?	6
4. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók	5	10. Ártalmatlanítás	6
5. A készülék leírása	6	11. Műszaki adatok	6
6. Üzembe helyezés	6	12. Garancia/szerviz	6

1. A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérüléseit és a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések, és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kétes esetekben ne használja a terméket, hanem forduljon a megadott ügyfélszolgálathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

- 1 x melegítő funkció masszírozó
- 3 x cserélhető masszírozó feltét
- 1 x használati útmutató

2. JELMAGYARÁZAT

A használati útmutatóban és a típustáblán használt szimbólumok:

	FIGYELEM! Sérülésveszélyre vagy egészségkárosodás veszélyére figyelmeztető információ
	FIGYELEM Figyelmeztetés a készülék vagy a tartozékok meghibásodásának veszélyére
	Termékinformáció Fontos információkra vonatkozó megjegyzések

	A készülék kettős védőszigetelésű, így megfelel a II. érintésvédelmi osztálynak.
	Olvassa el az útmutatót.
	Gyártó
	Csomagolóanyagot azonosító jelölés A = anyag rövidítése, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton
	Válassza szét a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	Ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint
	CE-jelölés A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelveknek.
	A termékek igazolhatóan megfelelnek az EAWU műszaki előírásainak.
	Megfelelőségi jel, Nagy-Britannia
	Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	Az importőr szimbóluma

3. RENDELTEZZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék az emberi test egyes részeinek masszírozására készült. Nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ne használja a masszírozót, ha az alábbi figyelmeztetések bármelyike vonatkozik Önre. Ha bizonytalan abban, hogy alkalmas-e az Ön számára a masszírozó készülék, akkor kérdezze meg az orvosát.

FIGYELEM!

- Ne használja a masszírozót
 - állatokon,
 - porckorongsérvt vagy a csigolyák kóros elváltozásai esetén,
 - semmiképpen szívőkörnyéki masszírozáshoz, ha szívritmus-szabályozót visel, és más testrészek esetében is kérdezze meg orvosát,
 - duzzadt, megégett, gyulladt vagy sérült bőr- és testrészekon,
 - terhesség alatt,
 - az arcon (szem), a gégén vagy más, különösen érzékeny testrészekon,
 - alvás közben,
 - gyógyszerek bevétele vagy alkoholfogyasztás után (korlátozott észlelésképeség!).
- A masszírozó használata előtt kérje ki orvosa véleményét...
 - ha súlyos betegségben szenved, vagy operáción esett át,

- lázzal járó megfázás, visszértágulat, trombozís, visszérgyulladás, sárgaság, cukorbetegség, az idegek betegsége (pl. isiász) vagy heveny gyulladás esetén.

A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan kárért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

4. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Olvassa át alaposan a használati útmutatót! A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Őrizze meg a használati útmutatót, és tartsa a többi használó számára is elérhető helyen. A készülék továbbadása esetén ezt az útmutatót is adja tovább.

FIGYELEM!

- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot. Fulladásveszély!

Áramütés

FIGYELEM!

- Minden más elektromos készülékhez hasonlóan ezt a masszírozó készüléket is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülhetőek legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.
- Ezért a készüléket...
 - csak a készüléken jelzett hálózati feszültséggel üzemeltesse,
 - tilos használni, ha maga a készülék vagy valamelyik tartozéka láthatóan sérült,
 - ne használja zivatarban.
- Meghibásodás vagy üzemzavarok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. Tilos a kábelnél vagy a készüléknél fogva kihúzni a hálózati dugaszt a fali aljzatból. Tilos a készüléket a hálózati kábelnél fogva tartani vagy szállítani. Tartsa távol a kábeleket a meleg felületektől. Semmi esetre se nyissa fel a készüléket.
- Ha megsérült a készülék hálózati vezetéke, cseréltesse ki a gyártó céggel vagy egy hivatalos ügyfélszolgálattal.
- Gondoskodjon arról, hogy a masszírozó, a hálózati dugasz és a kábel ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékokkal.
- Ezért a készüléket
 - csak száraz, beltéri helyiségekben használja,
 - csak száraz kézzel használja,
 - soha ne használja a fürdőakádban, a zuhany alatt vagy megtöltött mosdókagyló fölött,
 - soha ne használja úszómedencében, jakuzziban vagy szaunában,
 - soha ne használja a szabadban.
- Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.

Javítás

FIGYELEM!

- Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.

Tűzveszély

⚠ FIGYELEM!

- A készülék nem rendeltetészerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén tűzveszély állhat fenn!
- Ezért a masszírozó készüléket...
 - ne hagyja felügyelet nélkül, különösen, ha gyermekek vannak a közelben,
 - soha ne használja letakarva, pl. takaró, párna stb. alatt.

Kezelés

⚠ FIGYELEM

- Minden használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt.
 - Ügyeljen arra, hogy a mozgó részek mindig szabadon mozoghassanak.
 - Vigyázzon, hogy ne akadjon bele a haja a készülékbe.
 - A készülék ne érintkezzen hegyes vagy éles tárgyakkal.
 - Ne törje meg a kábelt.
 - Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. kályhától, fűtőtestektől vagy a közvetlen napsugárzástól.

5. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A kapcsolódó rajzokat a 3. oldalon találja.

BE/KI gomb

Lo: enyhe vibrációs masszírozás

1 Hi: erős vibrációs masszírozás

P1: 1. masszírozó program

P2: 2. masszírozó program

2 bekapcsolható melegítő funkció

3 cserélhető masszírozó feltétek

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati dugaszt és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék készenléti üzemmódban van.
- Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne lehessen megbotolni benne.

7. ALKALMAZÁS

Válassza ki a kívánt masszírozó programot vagy intenzitást a BE/KI gomb megnyomásával.

A készüléket egy vagy két kézzel tartva helyezze azt a masszírozandó testrészre. A masszírozást állva, ülve vagy fekve, illetve saját magán vagy valaki másán is végezheti. A masszírozó erős vagy kevésbé erős nyomásával a masszírozás intenzitása módosítható. Ne masszírozza ugyanazt a testrészt 3 percnél hosszabb ideig, ennek lejárta után másik testrészen folytassa a műveletet. A masszázst masszírozó feltétellel vagy anélkül is végezheti. Válasszon ki egy tetszőleges masszírozó feltételt. A bekapcsolható melegítő funkció használatakor a felhelyezett masszírozó feltétek akadályozzák a melegítéses kezelést. Ezért a melegítő funkció bekapcsolása nélkül használja a készüléket, ha masszírozó feltételt helyezett fel rá.

i Ne használja a masszírozó készüléket röviddel lefekvés előtt. A masszázs élénkítő hatású is lehet, és megnehezítheti az elalvást.

⚠ FIGYELEM!

A masszázsnak mindenkor kellemesnek és ellazító hatásúnak kell lennie. Ha a masszírozást fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi, szakítsa meg azt, vagy változtasson a masszírozó helyzetén.

8. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás

A hálózatról lecsatlakoztatott és lehűlt készüléket enyhén nedves kendővel törölje át. Ehhez enyhe tisztítószert is használhat.

⚠ FIGYELEM!

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugaszt.
- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket. Semmiképpen sem juthat be folyadék a készülékbe vagy a tartozékaiba.
- Csak akkor használja újra a készüléket, ha az már teljesen száraz.

Tárolás

A masszírozó készülék gyermekektől távol, száraz, hűvös helyen tartandó. Javasoljuk, hogy eredeti csomagolásában tárolja a készüléket.

9. MI A TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN?

Probléma	Ok	Elhárítás
A készülék nem működik.	A készülék nincs a hálózatra csatlakoztatva.	Dugja be a hálózati dugaszt, és kapcsolja be a készüléket.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.

10. ÁRTALMATLANÍTÁS

⚠ FIGYELEM

A környezet védelme érdekében a készüléket az élet-tartama végén nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országában található megfelelő gyűjtőhelyeken kell elvégezni. Mindig tartsa be a hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi előírásokat. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel, kérjük, forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervezethez. A használt készülékek visszavételi helyeiről pl. a helyi községi vagy városi önkormányzatnál, a helyi hulladékkezelő vállalatoknál vagy annál a kereskedőnél érdeklődhethet, akitől a készüléket vásárolta.



11. MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás:	220–240 V~ 50–60 Hz 5 W
Méret:	30,5 x 7,5 x 6,7 cm
Tömeg:	kb. 350 g

12. GARANCIA/SZERVIZ

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási jegyen talál.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way, WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

